



Termékkatalógus

Vértelenítő készülékek,
tartozékok és
nyomásinfúziós eszközök



A teljes terméklistát lásd a www.adamed.hu , illetve a www.vbm-medical.com honlapokon
A honlapokon további információk találhatóak, mint adatlapok, katalógusok, videók, stb.

Az ebben a katalógusban lévő termékekben nincs természetes alapú latex, hacsak külön specifikáció ezt nem említi.
A katalógusban található termékek nem tartalmazzak ftalátokat, melyet a CLP Regulation (EC) 1272/2008 szerint külön címkével kell jelölni

Tartalomjegyzék



Elektronikus vértelenítők

Tourniquet Touch TT20 + TT15
Tourniquet 6000

4

4 – 7. oldal



Sűrített levegővel működő vértelenítők

Tourniquet 2500 Tourniquet 5000
Tourniquet 2800 Tourniquet 2x500
Tourniquet 4500 Tourniquet 5800

7

7 – 9. oldal



Kézi vértelenítők

Kézi felfújó manométerrel
Kézi pumpa manométerrel

10

10. oldal



Vértelenítő mandzsetták

Szimpla mandzsetták
Dupla mandzsetták

11

11 – 15. oldal



Tartozékok vértelenítő készülékekhez, vértelenítő szalagok

Mérőszalag Kitakaró kendők
Vértelenítő alátétek Gördülő vértelenítő
Védőhuzat mandzsettákhoz Esmarch szalagok

16

16 – 20. oldal



Nyomásinfúziós zsákok

Egyszer használatos zsákok (Dispo Infusor)
Nyomásinfúziós zsák (Infusor)
Nyomásinfúziós zsákok
Tartozékok nyomásinfúziós zsákokhoz

21

21 – 26. oldal



Nyomásinfúziós automaták

Pressure Infusor 100
Pressure Infusor 200

27

27. oldal



ELEKTRONIKUS VÉRTELENÍTŐK

Tourniquet Touch

A vértelenítő készülékek új generációja érintőképernyős technológiával



Jellemzők

Érintőképernyő

- 100% premium üveg
- Könnyen tisztítható és fertőtleníthető
- Sebészi kesztyűvel is használható

Kijelző

- 8" (800 x 480 képpont)
- Széles láthatósági szög (178°)
- matt, csillogásmentes, alacsony reflexiójú

Akkumulátor

- Lithium ion (14.4 V – 93.6 Wh)
- Kb. 8 óra üzemidőt biztosít

Tápfeszültség

- 100 – 240 VAC

Tömeg és méretek

- 4.5 kg
- magasság 186 mm | szélesség 263 mm | mélység 226 mm



TT20

Működtethető

- szimpla mandzsettával,
- dupla mandzsettával regionális intravénás anesztéziához (IVRA)
- két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén.

Tourniquet TT20

Két csatornával

3.0 m tekercselt összekötő csövekkel (kék és vörös)

REF 01-20-000

Box

1

TT15

Működtethető

- szimpla madzsettával
- plusz nyomásinfúziós zsákkal öblítés céljára

Tourniquet TT15

Egy vértelenítő és egy öblítő csatornával

3.0 m tekercselt összekötő csövekkel (kék és fekete)

REF 01-15-000

Box

1

Összekötő csövek



- Tekercselt összekötő csövek, kék/vörös/fekete
- Kiegyenesített hossza 3.0 m



- Tekercselt összekötő cső kék/vörös/fekete
- Kiegyenesített hossz 3.0m



- Sima összekötő cső kék/vörös
- Hossza 4.5 m

Összekötő csövek

	TT 20	TT 20 + TT 15	TT 15	
	▪ Vértelenítő mandzsettákhoz ▪ Gyorscsatlakozó apa és anya	▪ Vértelenítő mandzsettákhoz ▪ Gyorscsatlakozó apa és anya	▪ Nyomásinfúzióhoz ▪ Gyorscsatlakozó anya és Luer Lock apa	
Hossza	vörös	kék	fekete	Box
3.0 m tekercselt	REF 20-20-742	REF 20-20-744	REF 20-20-740	1
6.0 m tekercselt	REF 01-00-520	REF 01-00-510	REF 01-00-530	1
4.5 m sima	REF 20-20-942	REF 20-20-944	-	1

Gördülő állvány és kosár



Gördíthető állvány kosárral

- Egy kosárral, amely 2 kg-mal terhelhető
- 4 rögzíthető görgővel (2 ESD-vel)

Méretek

- Magasság: 939 mm
- Szélesség: 400 mm
- Mélység: 400 mm

Tömeg

- 8.2 kg



Kosár

Méretek

- Magasság: 185 mm,
- Szélesség: 377 mm,
- Mélység: 196 mm

Tömeg

- 0.73 kg

Gördülő állvány

kosárral

REF 01-00-100

Box

1

Kosár

Külön tételként

REF 01-00-110

Box

1



SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ VÉRTELENÍTŐK

Sűrített levegővel működő vértelenítők

Sűrített levegő – analóg nyomáskijelzés – biztonsági kézi felfújó

Jellemzők

Nyomásszabályozás

- Pneumatikus precíziós nyomásszabályozó
- A mandzsetták gyors felfújása és leeresztése
- A szabályozó gomb nagyon pontos nyomásszabályozást biztosít
- A legnagyobb megengedett nyomás 600 Hgmm

Analóg nyomásmérő

- Nincs vibrálás a nyomásbeállítás közben
- Mindig a mandzsettában uralkodó tényleges nyomást mutatja
- Precíziós nyomásmérő műszer

Biztonsági kézi felfújó

- A sűrített levegő hálózat hibája esetén automatikusan kézi üzemre vált, a működéshez nincs szükség akkumulátorra.
- Minimális karbantartás igényel
- Bármikor használatra kész, még a sűrített levegő hiánya esetén is

Leeresztő gomb

- A véráramlás ellenőrzésére
- A helyi anesztetikum váltakozó elengedésére regionális intravénás anesztézia (IVRA) esetén
- Kézi üzemmódban biztosítja a mandzsetták leeresztését

Színkódolt, tekercselt összekötő csövek

- Biztonságos csatlakozást biztosít a mandzsetták és a készülék között
- Gyorscsatlakozóval (PLC)

Kézi beállítású időzítő óra

- Visszaszámlálási funkció hangjelzéssel
- Időmérő funkció



Asztali készülék
hordozó fogantyúval

Asztali készülék hordozó fogantyúval,
gördülő állvánnyal és kosárral

Univerzális rögzítődióval
és védőfedéllel

Asztali készülék hordozó fogantyúval,
gördülő állvánnyal, kosárral és
védőfedéllel

Készülékek



Tourniquet 2500

- A vértelen végtag biztosítására



Tourniquet 2800

- Beépített öblítőcsatornával
- A vértelen végtag biztosítására
- Öblítő csatornával



Tourniquet 4500

- A vértelen végtag biztosítására
- Regionális intravénás anesztéziához (IVRA)



Tourniquet 5000

- Beépített öblítőcsatornával
- A vértelen végtag biztosítására
- Regionális intravénás anesztéziához (IVRA)
- Öblítő csatornával



Tourniquet 2x500

- A vértelen végtag biztosítására
- Regionális intravénás anesztéziához (IVRA)
- Bilaterális sebészethez



Tourniquet 5800

- Beépített öblítőcsatornával
- A vértelen végtag biztosítására
- Regionális intravénás anesztéziához (IVRA)
- Bilaterális sebészethez
- Öblítő csatornával

Sűrített levegővel működő vértelenítők

RECTUS típusú csatlakozóval, 4m hosszú nyomáscsővel

Készülék	Asztali készülék fogantyúval	Asztali készülék fogantyúval, állvánnyal és kosárral	Készülék univerzális rögzítődióval, védőfedéllel	Készülék állvánnyal, kosárral és védőfedéllel	Box
2500	REF 15-12-500	REF 15-22-500	REF 15-13-500	REF 15-15-500	1
2800	REF 15-12-550	REF 15-22-550	REF 15-13-550	REF 15-15-550	1
4500	REF 19-12-500	REF 19-22-500	REF 19-13-500	REF 19-15-500	1
5000	REF 19-12-550	REF 19-22-550	REF 19-13-550	REF 19-15-550	1
2x500	REF 11-12-550	REF 11-22-550	REF 11-13-550	REF 11-15-550	1
5800	REF 11-12-580	REF 11-22-580	-	REF 11-15-580	1

Sűrített levegővel működő vértelenítők

NIST típusú csatlakozóval (nyomáscső nélkül)

Készülék	Asztali készülék fogantyúval	Asztali készülék fogantyúval, állvánnyal és kosárral	Készülék univerzális rögzítődióval, védőfedéllel	Készülék állvánnyal, kosárral és védőfedéllel	Box
2500	REF 15-12-500NIST	REF 15-22-500NIST	REF 15-13-500NIST	REF 15-15-500NIST	1
2800	REF 15-12-550NIST	REF 15-22-550NIST	REF 15-13-550NIST	REF 15-15-550NIST	1
4500	REF 19-12-500NIST	REF 19-22-500NIST	REF 19-13-500NIST	REF 19-15-500NIST	1
5000	-	REF 19-22-550NIST	REF 19-13-550NIST	REF 19-15-550NIST	1
2x500	REF 11-12-550NIST	REF 11-22-550NIST	REF 11-13-550NIST	REF 11-15-550NIST	1
5800	REF 11-12-580NIST	REF 11-22-580NIST	-	REF 11-15-580NIST	1

Kézi felfújó manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig



Kék színű, tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval



Piros színű összekötő csővel és gyorscsatlakozóval

Kézi felfújó manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig

Kék színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Piros színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Box
REF 20-18-601	REF 20-18-602	1

Kézi felfújó pumpa manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig



Kék színű, tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval



Piros színű összekötő csővel és gyorscsatlakozóval

Kézi felfújó pumpa manométerrel

Max. 600 Hgmm nyomáshatárig

Kék színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Piros színű tekercselt összekötő csővel és gyorscsatlakozóval	Box
REF 20-19-601	REF 20-19-602	1



VÉRTELENÍTŐ MANDZSETTÁK


A mandzsetták választéka

A VBM cég szimpla és dupla mandzsettákat gyárt minden méretben, egyenes és kónuszos kivitelben, többször használható és egyszer használatos változatban


Tulajdonságok

Egyenes mandzsetták

- Hengeres kivitel
- A mandzsetta proximális és distális fele ugyanolyan átmérőjű
- Nagy felületű tépőzáras rögzítéssel rendelkezik a mandzsetta biztonságos rögzítése érdekében
- Vékony és közepes méretű felső végtagokhoz

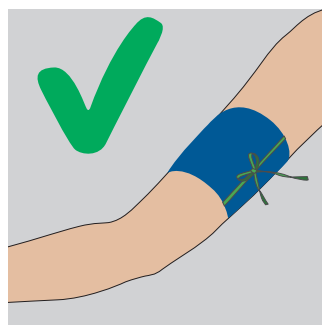


Egyenes mandzsetta

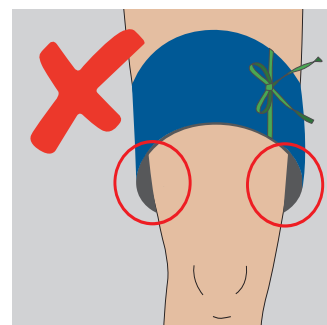

Egyenes mandzsetta

Kónuszos mandzsetták

- Íves kivitel, a distális rész átmérője kisebb mint a proximális részé
- A végtaghoz való javított illeszkedés miatt kisebb nyomás is elegendő a véráram blokkolásához
- Elsősorban a kónuszos alakú alsó végtagokhoz
- Nagy felületű tépőzáras rögzítéssel rendelkezik a mandzsetta biztonságos rögzítése érdekében
- Használata izmos végtagok esetén ajánlott, elhízott végtagnál pedig a mechanikus nyírás okozta kockázatok csökkentésére

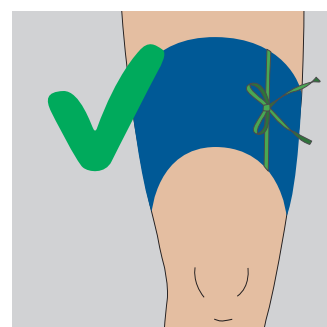

Kónuszos mandzsetta

Vértelenítő mandzsetták – többször használatos kivitel

Összehasonlító táblázat

	Szövet mandzsetta	Vékony mandzsetta	Szilikon tépőzáras mandzsetta
Szimpla és dupla mandzsetta	✓	–	✓
Egyenes és kónuszos mandzsetta	✓	✓	✓
Színkódolt a méretkiválasztás egyszerűsítése érdekében	✓	✓	✓
Nagy teherbírású szilikon felfújóbetét	✓	–	✓
Alacsony profilú (vékony) mandzsetta (integrált felfújóbetéttel)	–	✓	–
Természetes alapú gumi latex és PVC nélkül készül	✓	✓	✓
Gazdaságos használat validált újrafelhasználási eljárással	✓	✓	✓
Biztonságos használat szabályos tisztítás és ellenőrzés mellett	✓	✓	✓
Többször használható, kevesebb hulladék termelődik	✓	✓	✓
Fertőtlenítés törléssel	✓	✓	✓
Könnyen tisztítható és gyorsan szárad	–	✓	✓
Autoklávozható 134 °C-ig (273 °F)	–	–	✓

Vértelenítő mandzsetták – többször használatos kivitel

A gazdaságos megoldás

Szövet mandzsetták



Vékony mandzsetták



Szilikon tépőzáras mandzsetták



Egyszer használatos vértelenítő mandzsetták

Mindenek előtt a biztonság!

Jellemzők

Egyszer használatos mandzsetták

- Védelmet nyújt a kórházi fertőzések megelőzése érdekében
- Használata előnyös erős szennyeződés esetén
- Egyenes és kónuszos kivitelben is létezik
- A szimpla és dupla mandzsetták teljes méretválasztéka rendelkezésre áll
- Színkódolt a méretkiválasztás egyszerűsítése érdekében
- Alacsony profilú kivitel
- Steril csomagolás
- Egyszer használatos
- A gyártás során nem használnak természetes alapú gumi latexet és PVC-t

Egyszer használatos mandzsetták



Adagoló doboz


- Színkódolt a méretválasztás és utánrendelés egyszerűsítésére
- Egyszerűen tárolható
- Az alacsony profil helytakarékos tárolást tesz lehetővé



Szimpla és dupla mandzsetták

Szimpla mandzsetták

			Egyszer használatos mandzsetták		Szövet mandzsetták	Vékony mandzsetták	Szilikon tépőzáras mandzsetták	
Páciens	Hossz	Szín	Egyszer használatos	Box	Mosható	Mosható	Autoklávozható	Box
Csecsmő	20 cm	–	REF 20-34-700SLZ-1	10	REF 20-54-700	REF 20-74-700	REF 20-64-700	1
Gyermek	30 cm		REF 20-34-710SLZ-1	10	REF 20-54-710	REF 20-74-710	REF 20-64-710	1
Kar	35 cm		REF 20-34-711SLZ-1	10	REF 20-54-711	REF 20-74-711	REF 20-64-611	1
Kar	46 cm		REF 20-34-712SLZ-1	10	REF 20-54-712	REF 20-74-712	REF 20-64-612	1
Kar/alsó lábszár	46 cm		REF 20-34-715SLZ-1*	10	REF 20-54-512*	REF 20-74-715*	REF 20-64-512*	1
Láb	61 cm		REF 20-34-722SLZ-1*	10	REF 20-54-522*	REF 20-74-722*	REF 20-64-522*	1
Láb	76 cm		REF 20-34-727SLZ-1*	10	REF 20-54-527*	REF 20-74-727*	REF 20-64-527*	1
Láb	86 cm		REF 20-34-728SLZ-1*	10	REF 20-54-528*	REF 20-74-728*	REF 20-64-528*	1
Láb	107 cm		REF 20-34-729SLZ-1*	10	REF 20-54-729	REF 20-74-729*	–	1

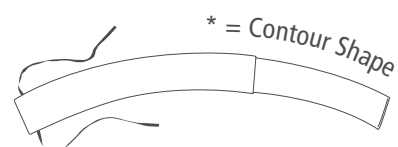

Dupla mandzsetták

a régiólnális intravénás anesztézia számára (IVRA)


			Egyszer használatos mandzsetták			Szövet mandzsetták	Szilikon tépőzáras mandzsetták		
Páciens	Hossz	Szín	Egyszer használatos	Box	Mosható	Autoklávozható	Box		
Csecsemő	20 cm	—	—	10	REF 20-50-700	—	1		
Gyermek	30 cm		REF 20-30-710SLZ-1	10	REF 20-50-710	—	1		
Kar	35 cm		—	10	REF 20-50-711	REF 20-60-711	1		
Kar	46 cm		REF 20-30-712SLZ-1	10	REF 20-50-712	REF 20-60-712	1		
Láb	61 cm		REF 20-30-722SLZ-1	10	REF 20-50-722	REF 20-60-722	1		
Láb	76 cm		—	10	REF 20-50-727	—	1		
Láb	86 cm		—	10	REF 20-50-728	—	1		
Láb	107 cm		—	10	REF 20-50-729	—	1		



TARTOZÉKOK VÉRTELENÍTŐ MANDZSETTÁKHOZ

Mérőszalag

a VBM cég által gyártott vértelenítő mandzsettákhoz

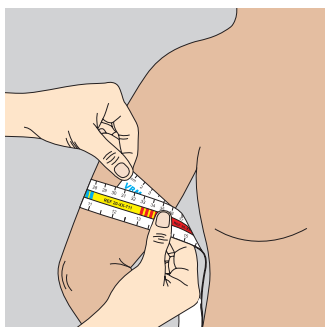

Jellemzők

- Színkódolt, hogy könnyen azonosítható legyen a végtag mérete és a hozzá való mandzsetta
- Egyszer használatos


Mérőszalag

REF 20-95-222

Box

50

Vértelenítő alátét

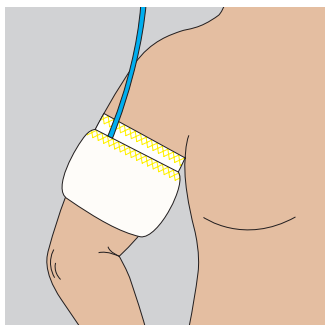


Tulajdonságok

- Védi a mandzsetta alatti lágy szöveteket
- Csökkenti a a lágy szövetek gyűrődés, becsípődés, elnyírás okozta károsodását
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos

Vértelenítő alátét

Páciens	Méret	Szín	Tiszta csomagolásban	Steril csomagolásban	Box
Csecsemő	≤ 20 cm	○	REF 23-00-700	REF 23-00-700-1	10
Gyermek	≤ 30 cm	●	REF 23-00-710	REF 23-00-710-1	10
Kar	≤ 35 cm	●	REF 23-00-711	REF 23-00-711-1	10
Kar	≤ 46 cm	●	REF 23-00-712	REF 23-00-712-1	10
Láb	≤ 61 cm	●	REF 23-00-722	REF 23-00-722-1	10
Láb	≤ 76 cm	●	REF 23-00-727	REF 23-00-727-1	10
Láb	≤ 86 cm	●	REF 23-00-728	REF 23-00-728-1	10
Láb	≤ 107 cm	●	REF 23-00-729	REF 23-00-729-1	10

Védőfólia

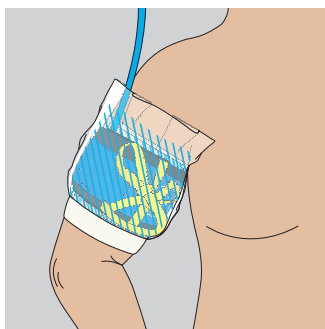



Tulajdonságok

- Megvédi a mandzsettát a szennyeződésektől
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos

Védőfólia

Méret	tiszta	Steril	Box
Kicsi	REF 20-11-111	REF 20-11-111-1	50
Közepes	REF 20-11-333	REF 20-11-333-1	50
Nagy	REF 20-11-222	REF 20-11-222-1	50

Izolációs fólia

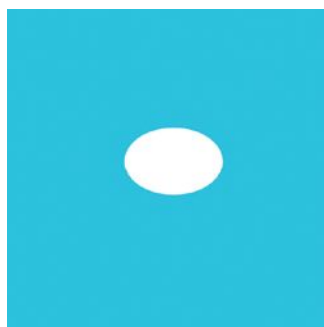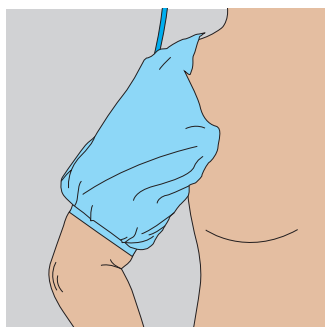

Tulajdonságok

- Elválasztja a mandzsettát a steril műtéti területtől
- Megakadályozza, hogy folyadék kerüljön a mandzsetta alá, ami kémiai sérülést okozhatna a bőrön
- Steril és nem steril változatban
- Egyszer használatos


Izolációs fólia a vértelenítő mandzsettákhoz

Méret	Tiszta	Box	Steril	Box
Karra	REF 24-00-100	40	REF 24-00-100-1	10
Lábra	REF 24-00-200	40	REF 24-00-200-1	10
Lábra, extra méret	REF 24-00-300	40	REF 24-00-300-1	10

Gördülő vértelenítő

Gyors és egyszerű vérkiszorítást biztosít másodpercek alatt

Az Esmarch szalag alternatívája

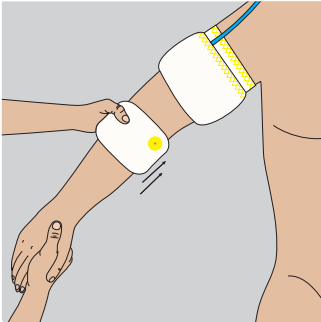

Tulajdonságok

- Felfújható vérekiszorító rendszer
- 100 %-ban orvosi tisztaságú szilikonból van
- Gyors és hatékony eljárás
- Teljes méretválaszték áll rendelkezésre
- Többször használatos

Gördülő vértelenítő

Méret	Végtag	Szín	Többször használatos	Box
1	20–28 cm	○	REF 21-95-711	1
2	26–33 cm	●	REF 21-95-712	1
3	31–40 cm	●	REF 21-95-719	1
4	38–49 cm	●	REF 21-95-722	1
5	47–60 cm	●	REF 21-95-727	1
6	58–70 cm	●	REF 21-95-729	1

Tartozékok



Kézi felfújó pumpa nyomásmérővel

- 200 Hgmm
- Összekötő cső (100 cm)
- Gyorscsatlakozók, és felfújó tű



Kézi felfújó nyomásmérővel

- 200 Hgmm
- Összekötő cső (100 cm)
- Gyorscsatlakozók és felfújó tű



Rögzítő ék

- Többször használatos
- Anyaga szilikon



Mérőszalag a VBM gördülő vértelenítőhöz

Színkódolt az megfelelő méretű gördülő mandzsetta egyszerű kiválasztása érdekében

Kézi felfújó pumpa és manométer

REF 21-95-350	Box	1
---------------	-----	---

Kézi felfújó manométerrel

REF 21-95-300	Box	1
---------------	-----	---


Rögzítő ék

Méret		Box
Kicsi	REF 21-95-200	1
Nagy	REF 21-95-201	1

Mérőszalag

REF 21-95-111	Box	10
---------------	-----	----

Esmarch szalag

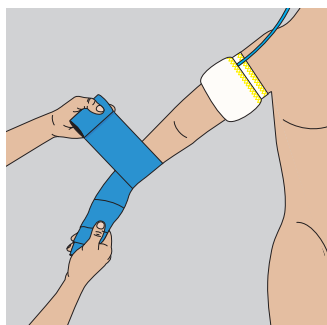

Tulajdonságok

- Bármilyen végtag esetén biztonságos vértelenítést tesz lehetővé
- Nagy méretválaszték: 5 különböző szélességi méretben
- Többször használatos vagy steril, egyszer használatos változatban

Esmarch szalag

Széles-ség	Hosz-szúság	Többször használatos	Box	Széles-ség	Hosz-szúság	Steril, egyszer használatos	Box
6 cm	5 m	REF 20-20-060	5	6 cm	4 m	REF 20-21-060-1	10
8 cm	5 m	REF 20-20-080	5	8 cm	3 m	REF 20-23-080-1	10
10 cm	5 m	REF 20-20-100	5	8 cm	4 m	REF 20-21-080-1	10
12 cm	5 m	REF 20-20-120	5	10 cm	4 m	REF 20-21-100-1	10
15 cm	5 m	REF 20-20-150	5	15 cm	4 m	REF 20-21-150-1	10



NYOMÁSINFÚZIÓS ZSÁKOK

Dispo Infusor (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Nyomásinfúziós zsákok az infúzió gyors beadására és öblítési célra

Jellemzők

Átlátszó háló

- Jól látható az infúziós zsák és a folyadékszint

Zsebes kivitel akasztóval, tépőzáras rögzítővel*

- Az infúziós zsák egyszerűen és gyorsan cserélhető

Nyomásindikátor

- Színkódolt, túlnyomás-szeleppel védett
- 360°-ban látható

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé

Háromjáratú csap

- a nyomás ellenőrzésére
- gyors leeresztésre

Egyszer használatos

- Csökkenti a keresztfertőzések kockázatát

* Akasztóval és tépőzáras rögzítőszalaggal
Csak akasztóval: Dispo Infusor 3000 ml



"Dipso Infusor" Luer Lock anyacsatlakozóval

"Dipso Infusor" kézi felfújóval és háromjáratú csappal

"Dipso Infusor" kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színkódolt nyomásindikátorral

Dispo Infusor

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval és háromjáratú csappal	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színkódolt nyomásindikátorral	Box
500 ml	REF 56-01-050	REF 56-03-050	REF 56-02-050	5
1000 ml	REF 56-01-100	REF 56-03-100	REF 56-02-100	5
3000 ml	REF 56-01-300	—	REF 56-02-300	1

Infusor (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Nyomásinfúziós zsák infúzió gyors beadására és öblítési célokra

Jellemzők

Teljesen átlátszó

- Lehetővé teszi, hogy folyadékszint jól látható legyen minden irányból
- 360°-ban látható folyadékszint

Körbetekerős kivitel akasztóval

- Az infúziós zsák könnyen és gyorsan cserélhető
- Egyenletes nyomáseloszlás az infúziós zsák teljes felületén

Nyomásmérő műszer

- Precíziós manométer
- Pontos mérés a 0 – 300 Hgmm tartományban

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé

Háromjáratú csap

- A nyomás ellenőrzésére
- Gyors leeresztésre

Többször használható

- Könnyen tisztítható (anyaga PU)



"Infusor" Luer Lock anyacsatlakozóval

"Infusor " kézi felfújóval, háromjáratú csappal és nyomásindikátorral

"Infusor" kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel

Infusor

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színekódolt nyomásindikátorral	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel	Box
500 ml	—	REF 57-02-050	REF 57-08-050	1
1000 ml	—	REF 57-02-100	REF 57-08-100	1
3000 ml	REF 57-01-300	REF 57-02-300	REF 57-08-300	1

Nyomásinfúziós zsák (500 ml / 1000 ml)

Nyomásinfúziós zsákok infúzió gyors beadására és öblítési célokra

Jellemzők

Átlátszó háló

- Jól látható a behelyezett infúziós zsák és a folyadékszint

Zsebes kivitel kettős akasztóval

- Az infúziós zsák könnyen és gyorsan cserélhető

Nyomásmérő műszer

- Precíziós manométer
- Pontos nyomásmérés a 0 – 300 Hgmm tartományban

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé
- Leeresztő szelep a nyomásbeállításhoz

Többször használható



Nyomásinfúziós zsák kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színekódolt nyomásindikátorral

Nyomásinfúziós zsák kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós nyomásmérővel

Nyomásinfúziós zsák

Méret	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és színekódolt nyomásindikátorral	Kézi felfújóval, háromjáratú csappal és precíziós manométerrel	Box
500 ml	REF 58-02-050	REF 58-08-050	1
1000 ml	REF 58-02-100	REF 58-08-100	1

Nyomásinfúziós zsák 3000 / 5000 ml

Nyomásinfúziós zsák öblítési célokra minimál invazív sebészethez

Jellemzők

Átlátszó háló

- Jól látható a behelyezett infúziós zsák és a folyadékszint

Kivitel

- Zsebes kivitel cipzárral

nyomásmérő műszer

- Precíziós manométer
- Pontos nyomáskijelzés a 0 – 300 Hgmm tartományban

Kézi felfújó

- Nagy térfogatú, gyors felfújást tesz lehetővé
- A nyomásbeállítást leeresztő szelep segíti

Többször használható

- A felfújóbetét cserélhető (latex)



Nyomásinfúziós zsák
Luer Lock anyacsatlakozóval



Nyomásinfúziós zsák kézi felfújóval és precíziós
manométerrel

Nyomásinfúziós zsák

Méret	Luer Lock anyacsatlakozóval	Kézi felfújóval és precíziós manométerrel	Box
3000 ml / 5000 ml	REF 52-01-300*	REF 52-08-300*	1

*Természetes gumi latexet tartalmaz

Nyomásmérő műszer

Túlnyomás ellen védett, a nyomásinfúziós zsákhoz rögzíthető kivitelű



Nyomásmérő 300 Hgmm

REF 20-17-301

Box

1

Kézi felfújó



Kézi felfújó

Színkódolt nyomáindikátorral
és háromjáratú csappal

REF 51-02-666

Box

1



Kézi felfújó

Leeresztő szeleppel

REF 51-10-666

Box

1



Kézi felfújó

Háromjáratú csappal

REF 51-03-666

Box

1

Nyomásinfúziós automaták

Minimál invazív sebészi beavakozás során az öblítés céljára szolgáló nyomásinfúziós zsákok automatikus működtetésére

Tulajdonságok

Precíziós nyomásszabályozás

- Nagyon pontos nyomásszabályozás
- Megtartja a beállított nyomásértéket és biztosítja a kompenzációt
- A nyomás 300 Hgmm értékre limitálva

Védőtető

- Megvédi a készüléket a folyadékszennyeződésektől

Tekercslet összekötőcső

- Biztonságos összekötést tesz lehetővé
- Fém Luer Lock apacsatlakozó

Univerzális rögzítődíó

- Vízszintes vagy függőleges hordozóra is felszerelhető, sínre vagy rúdra

Pressure Infusor 100

Sűrített leveővel működik, egycsatornás, 4 m-es nyomáscsővel

Változat	4 m-es nyomáscsővel és RECTUS nyomáscsatlakozóval	NIST nyomáscsatlakozóval	Box
Univ. rögzítődíóval	REF 52-13-100	REF 52-13-100NIST	1
Állvánnyal és kosárral	REF 52-15-100	REF 52-15-100NIST	1



Pressure Infusor 200

Sűrített levegővel működik, átkapcsolható két csatorna között, 4 m-es nyomáscsővel

Változat	4 m-es nyomáscsővel és RECTUS nyomáscsatlakozóval	NIST nyomáscsatlakozóval	Box
Univ. rögzítődíóval	REF 52-13-200	REF 52-13-200NIST	1
Állvánnyal és kosárral	REF 52-15-200	REF 52-15-200NIST	1





VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1
72172 Sulz a. N.
Germany
Tel.: +49 7454 9596-0
Fax: +49 7454 9596-33
e-mail: info@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de


Pásztor ADA-MED Kft.

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.
Tel: +3630-9523229
Fax: +361-3970109
E-mail: adamed@adamed.hu
www.adamed.hu

Connect with us:



További VBM termékkatalógusok

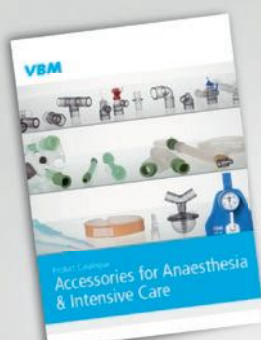

CE/CE₀₁₂₃

KAT_KY_2.0_EN_10.19
KAT_KY_2.0_HU_03.20