


VBM kaffnyomás-szabályozó automata

Nagy térfogatú, alacsony nyomású tracheatubusok ballonnyomásának önműködő szabályozására

- Lehetővé teszi, hogy a lehető legkisebb nyomást alkalmazzuk a nyomás okozta nekrosis és a mucosa ischaemiája kockázatának csökkentésére.
- A beállított nyomásértéket automatikusan megtartja.
- Kompenzálja a szivárgás okozta nyomásesést, ha a nyomásesés mértéke meghaladja az 1 cm H₂O értéket, ezáltal csökkenti az aspiráció és az aspiráció okozta pneumónia veszélyét.
- Az anesztézia gázok diffúziója által okozott nyomásnövekedést automatikusan kiegyenlíti.
- A készülék vészjelzést ad szivárgás és véletlen szétkapcsolódás esetén.

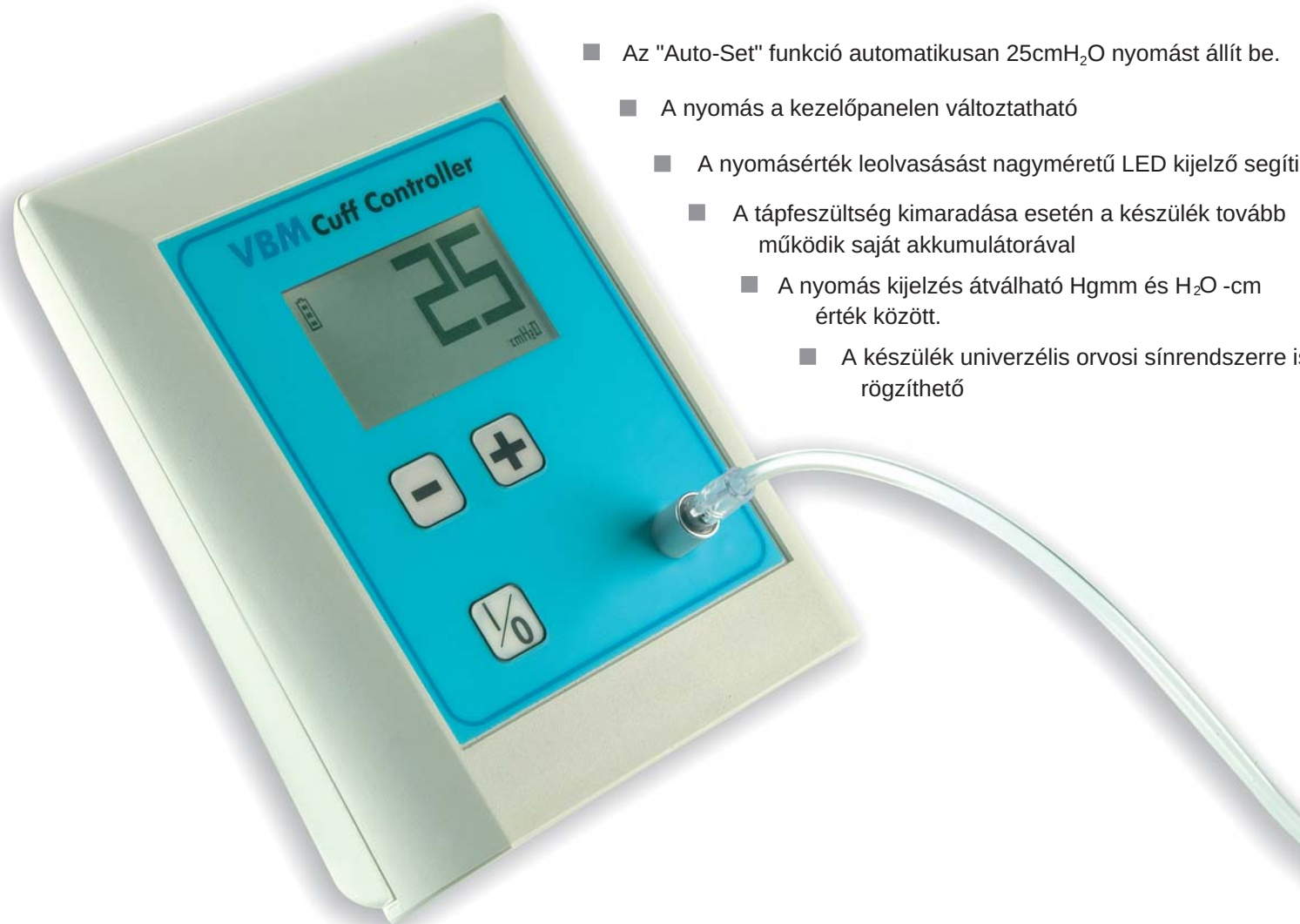

- Az "Auto-Set" funkció automatikusan 25cmH₂O nyomást állít be.
- A nyomás a kezelőpanelen változtatható
- A nyomásérték leolvasását nagyméretű LED kijelző segíti.
- A tápfeszültség kimaradása esetén a készülék tovább működik saját akkumulátorával
- A nyomás kijelzés átváltható Hgmm és H₂O -cm érték között.
- A készülék univerzális orvosi sínrendszere is rögzíthető

Cuff Controller

akkumulátorral és 100cm-es összekötő csővel,
iniverzális rögzítővel

Összekötő cső: 100cm

Összekötő cső: 200cm

Kat.szám
55-13-500
54-05-112
54-05-113

Műszaki adatok:


Tápfeszültség: 90 - 250 VAC
Szabályozási tartomány: 0-99 cmH₂O (0 to 73 Hgmm)
Méret: 150mm (H) x 120mm (SZ) x 60mm (M)
Tömege: 0,4kg

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633
E-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

Pásztor ADA-MED Kft.

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.
Tel.: +3630-9523-229 • Fax: 361-397-0109
E-mail: adamed@adamed.hu • www.adamed.hu

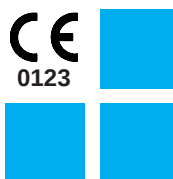

VBM kaffnyomásmérő készülékek

**tracheatubusok ballonjának felfújására és nyomásellenőrzésére.
Nagy térfogatú, alacsony nyomású ballonokhoz.**

- Csökkenti a nyomás okozta nekrosis és a mucosa ischaemiájának kockázatát.
- Nagyban csökkenti az aspiráció és az aspiráció okozta pneumónia veszélyét.
- A készülék ergonomikus kialakítású, egy kézzel működtethető.



A kaffnyomásmérők jellemzői



Összekötő cső
100 vagy 200 cm hosszú

Akasztó
Illeszkedik a szabványos orvosi sínrendszerhez (Típusonként különböző kivitelű.)



Leeresztő szelep
segítségével a nyomás csökkenthető a beállítás során vagy az anesztézia gázok diffúziója okozta nyomásnövekedés esetén



Luer csatlakozó
A tracheautbusokat közvetlenül vagy összekötő csővel csatlakoztathatjuk a kaffnyomásmérőhöz



Vákuumszelep
A ballon összenyomásának hatására szívóhatás keletkezik. Ezzel lehetővé válik a ballonok gyors és teljes leeresztése, ha a tubusok ballonját ehhez a csomhoz csatlakoztatjuk

Felfújó ballon
a tubusok ballonjainak felfújására



Zöld tartomány
Azt az ideális nyomástartományt jelöli, amely a legjobb kompromisszum az aspiráció és ischaemia kockázata között

Termékválaszték

Mindegyik típust 100 cm hosszú összekötő csővel szállítjuk

Összekötő cső
Hossza: 100cm, 200 cm

Kat.szám: 54-05-112
54-05-113



POCKET
Ø 50mm skála
Kat.szám: 54-04-000



MONITOR
Ø 68mm skála
Kat.szám: 54-05-000



PEDIATRIC
Ø 50mm -es skála, akasztóval
Kat.szám: 54-02-001



SENSITIVE
Ø 50mm skála, akasztóval
A leeresztő szeleppel a kívánt nyomás finomabban állítható
Kat.szám: 54-03-001



UNIVERSAL
Ø 68mm skála
A skála két zöld tartományt jelöl:
• tracheatubusok számára (22-32cmH₂O)
• laryngeális tubusok és laryngeális maszkok számára (60-70cmH₂O)
REF 54-07-000

